



## Anleitung: Datenversand vom PC

Zum Datenversand können Sie entweder die Diabetes-Tagebuchsoftware *DIABASS6* oder den *DIABASS SecureSend Uploader* verwenden. *DIABASS6* bietet zahlreiche Auswertungen und erlaubt eine komfortable Dokumentation aller relevanten Diabetes-Daten, beispielsweise von Medikamenten, Insulin und Ernährung.


Beide Programme können kostenlos heruntergeladen werden, bitte folgen Sie dazu der Anleitung auf dem Infoblatt, welches Sie von Ihrer Praxis/Klinik erhalten haben.

### Schritt 1

#### Wenn Sie *DIABASS6* verwenden:

Führen Sie einen Doppelklick auf die wie oben heruntergeladene CSV-Datei aus.

Anschließend öffnet sich ein Abfragefenster, wie diese Datei geöffnet werden soll.

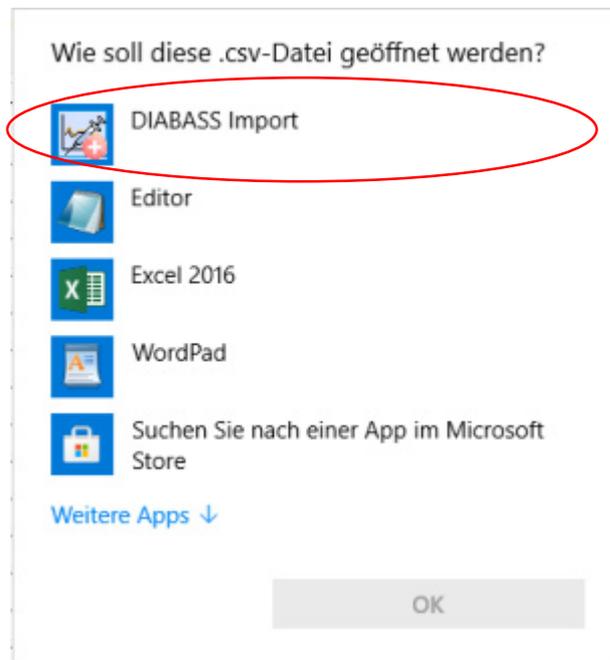

Wählen Sie dort **DIABASS IMPORT**. Die Daten werden dann automatisch in Ihr Tagebuch übernommen.



### Schritt 2

Wenn Sie *DIABASS6* verwenden:



Klicken Sie auf die Schaltfläche **VERSAND**, diese befindet sich am oberen Bildschirmrand. Anschließend klicken Sie auf **MEINE WERTE VERSENDEN**.

Wenn Sie den *DIABASS SecureSend Uploader* verwenden:



Klicken Sie auf das Programmsymbol von *DIABASS SecureSend* auf Ihrem Desktop.



### Schritt 3

Bitte geben Sie nun die Identifikationsdaten zum Versand ein.

Diese sind auf dem Infoblatt abgedruckt, welches Sie von Ihrer Praxis/Klinik erhalten haben



DIABASS SecureSend 1.0.0.17

ID eingeben Empfängerinfo Daten einlesen Nachricht Versenden

ID eingeben  
Bitte geben die Identifikationsdaten ein und klicken dann auf WEITER

Bitte ID des Empfängers eingeben:  
TZRA

Vorname: Test Name: SecureSend Geburtsdag: 01.01.1955

Bitte geben Sie hier Ihren eindeutige Patientencode ein: A331FD

Bitte achten sie unbedingt auf eine korrekte Eingabe, denn Ihre Daten werden auf Basis dieser Angaben verschlüsselt.  
Der Empfänger kann die Daten nur dann entschlüsseln, wenn Ihre Angaben dort in exakt gleicher Weise gespeichert sind.

Abbruch Weiter

Klicken Sie dann auf **WEITER**

### Schritt 4

Es wird nun der Empfänger angezeigt.

DIABASS SecureSend 1.0.0.17

ID eingeben Empfängerinfo Daten einlesen Nachricht Versenden

Empfängerinfo  
Bitte beachten Sie etwaige Informationen des Empfängers und klicken dann auf WEITER

 **Musterpraxis**  
Musterstr. 12345  
DE-12345 Musterstadt  
<http://www.diabass.com>

Abbruch Zurück Weiter


Wenn dieser so richtig ist, bestätigen Sie bitte mit **WEITER**



## Schritt 5

### Wenn Sie den DIABASS SecureSend Uploader verwenden:

Wählen Sie nun das Messgerät bzw. die Datei zur Datenübermittlung aus der Liste aus und bestätigen mit **DOPPELKLICK**. Es öffnet sich dann ein Assistent zu Datenübertragung, bitte folgen Sie den dortigen Anweisungen.

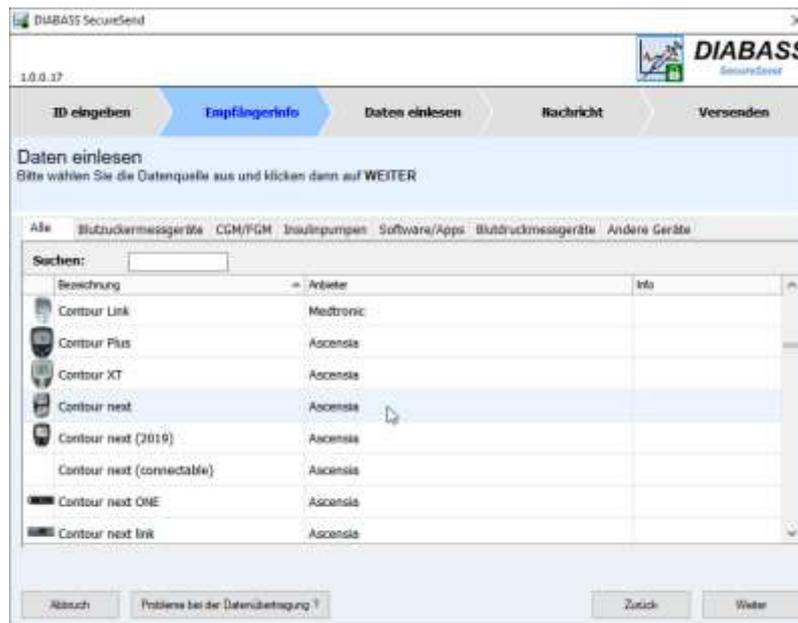

## Schritt 6

Nach erfolgreicher Datenimport können Sie nun noch eine Nachricht für den Empfänger eingeben.



Klicken Sie dann auf **WEITER**



## Schritt 7

Die Daten werden nun hochsicher verschlüsselt (AES-256) und für die Übermittlung vorbereitet. Sie können nun wählen, auf welche Weise die Daten verschickt werden sollen.



### Versand mit Standardmailprogramm:

Nach Klick auf **WEITER** wird eine Nachricht in Ihrem Standard-Email-Programm erzeugt, die Nachricht muss anschließend von Ihnen noch manuell versendet werden.

Diese Option ist nur verfügbar, wenn das eMail-programm eine Übergabe von Dateianhängen erlaubt.

### Anonym über den DIABASS-Server:

Nach KLICK auf **WEITER** wird zunächst nochmals Ihre Einwilligung zur Datenübermittlung abgefragt. Wenn Sie einverstanden sind, werden die verschlüsselten Daten dann an den *DIABASS SecureSend*-Server übermittelt. Von dort werden Ihre Werte dann per E-Mail mit neutralem Absender an den Empfänger weitergeschickt. Anschließend werden die Daten auf dem *DIABASS SecureSend*-Server wieder gelöscht.